

Nano-Campo- Handbuch und Gebrauchsanweisung

Inhaltverzeichnis

1.0.	Einleitung	Seite 2
1.1.	Das Kristallwasser	Seite 5
1.2.	Das Mikrobiom	Seite 5
1.3.	Die Emma-Kunz-Grotte	Seite 6
1.4.	Erklärung der Funktionsweise	Seite 7
1.5.	Mit NanoCampo anderen helfen	Seite 8
1.6.	Verwendung des NanoCampo-Systems bei einer Krankheit	Seite 9
1.7.	Kinesiologische Testung, Abonnement und Anwendung bei Tieren	Seite 9
2.0.	Das NanoCampo-Handbuch	Seite 10
2.1.	Die Zusammensetzung des NanoCampo-Systems	Seite 10
2.2.	Sicherheitsbestimmungen und Garantie	Seite 11
2.3.	Voraussetzungen für die Installation	Seite 12
2.4.	Hardware-Anschlüsse	Seite 13
2.5.	Software	Seite 13
2.6.	Vorbereiten der Installation	Seite 13
2.7.	Installation und Benutzung der NanoCampo-Matte	Seite 13
3.0.	Die NanoCampo-Gebrauchsanweisung	Seite 16
3.1.	Kurzfassung der NanoCampo-Gebrauchsanweisung	Seite 16
3.2.	Gebrauchsanweisung Normalfassung	Seite 16
3.3.	Behandlung von mehreren Menschen (Tieren) mit nur einer Matte	Seite 22
3.3.	Therapeuten-Anwendungs-Konzept	Seite 23

1.0. Einleitung

Herzlichen Dank, dass du dich für das NanoCampo-System entschieden hast. Mit diesem Handbuch erhältst du den Leitfaden zu allen wichtigen Informationen.

Die NanoCampo-Matte ist das Herzstück unseres Resonanzkonzeptes. Sie unterstützt biophysikalisch Körper, Geist und Seele in der Nacht, damit diese sich mit Nano-Schwingungen (Elektronen) stärken, regenerieren und reparieren können. Mit dieser Energie ist der Körper bis 6mal besser in der Lage, sich mit den gesunden Informationen aus dem Universum zu verbinden und sich selbst zu heilen. Die NanoCampo-Matte heilt nicht, sondern sie stärkt die Energie in den Zellen, damit diese wieder besser funktionieren. Die NanoCampo-Matte hat keine medizinische Anerkennung. Die Nutzung der Matte liegt einzig in der Verantwortung des Anwenders.

Alle unsere Aussagen haben keinen wissenschaftlich beweisbaren Hintergrund. NanoCampo ist ein Wellnessgerät. Alle Inhalte auf diesen Seiten beinhalten weder eine Heilkunde noch ersetzen sie eine ärztliche Abklärung und/oder Behandlung. Die hier dargestellten Thesen entsprechen, nicht der offiziellen medizinischen Lehrmeinung. Wer Informationen aus dem hier Gesagten anwendet, tut dies in eigener Verantwortung. Es werden weder Diagnosen gestellt, noch Heilversprechen abgegeben. Diese Seiten ersetzen keinen Arztbesuch und stellen keine Beratung im medizinischen Sinne dar.

Die NanoCampo-Matte und deren Nano-Ströme und -Schwingungen sind technisch nicht messbar. Sie sind jedoch genauso in der Natur vorhanden. Die Energie, welche sie überträgt, ist jedoch körperlich für feinfühligere Menschen spürbar und kinesiologisch testbar. Die gesamte NanoCampo-Entwicklung hat mehrere Jahre gedauert und basiert, weil so feine Schwingungen nicht messbar sind, ausschließlich auf Erfahrungen aus kinesiologisch getesteten Resultaten. Die Wirkung auf dem Körper liegt im Nano-Volt-Bereich – bei einer konventionellen Magnetfeldmatte liegt diese bei ca. 1 Volt.

Damit man diese beiden Magnetfelder vergleichen kann, zeigen wir für das Verständnis, gerne die Relationen der beiden verschiedenen Magnetfeld-Wirkungsweisen auf. 1 Nano-Volt ist Tausend Mal feiner als 1 Microvolt, 1 Million Mal feiner als 1 Millivolt und 1 Milliarde Mal feiner als 1 Volt. Ein konventionelle Magnetfeldmatte ist somit ca. 1 Milliarde mal stärker. Ein so starker Strom, kann nicht in die Zelle gelangen. Die Zelle würde sofort sterben. Dieser Strom starke bleibt in Blut und Lymphe und verbessert damit die Durchblutung und kann damit auch über die Zellwand, Reaktionen im Innern der Zelle bewirken. Elektronen im Nano-Voltbereich bilden hingegen ein natürliches Biofeld und können direkt durch die Zellwand in alle Zellen wandern. Alle Ströme und Schwingungen, welche feiner sind als 1 Microvolt, sind

aufbauend und stärkend sowie rechtsdrehend. Alle diese Aussagen entsprechen nicht der allgemeinen medizinischen Lehrmeinung, sondern sind nur das Resultat unserer kinesiologischen Tests und Erfahrungen.

Die NanoCampo-Matte hilft mit Ihren Schwingungen in allen Situationen und unterstützt die Zellen immer. Da wir nur Elektronen-Energie über Nanovolts übergeben, müssen wir immer abwarten, was der Körper damit macht und wie er sich selbst heilt. Jeder stärkende, anabole Aufbau, wie zum Beispiel mit der NanoCampo-Matte, dauert mindestens 6mal länger als der tötende, katabole Abbau. Jede Reparatur braucht somit mindestens 6mal länger als deren Verletzung. Der Benutzer der NanoCampo-Matte sollte keine zeitliche Reparatur-Erwartungen haben, sondern in Demut dankbar sein, wenn Körper, Geist und Seele sich mit der erhaltenen Energie, wieder selbständig heilen. Wir können keine Heilversprechen geben. Wir können aber, Dank unserem eigenen NanoCampo-Test versichern, dass mit der Zeit, eine eindeutige Verbesserung eintreten wird. Der getestete Blutstropfen erlebte einen bahnbrechenden Rekord. Der Tropfen hat nach einem 5-G-Stresstest und nach nur 40 Minuten NanoCampo-Behandlung noch 18 Tage gelebt. Das ist absoluter Weltrekord. An zweiter Stelle soll ein Blutstropfen eines medialen Meisters sein, das noch 10 Tage gelebt hat. Alle Studien und Informationen dazu findest du auf www.NanoCampo.ch.

Zuerst benutzt du unsere Wochenpläne. Diese sind fixfertig programmiert und du kannst selbständig im Internet deinen geeigneten Plan wählen. Alle Wochenpläne regulieren die Zellen und können für den Aufbau und die Stärkung der Zellen eingesetzt werden. Die gute Regulation zwischen Körper, Geist und Seele ist die Basis für jede Gesundheit, für die Prävention sowie auch für ein gesundes Altern.

Doch wer ein ernstes Gesundheitsproblem hat, sollte nach der Regulation mit Wochenplänen den nächsten Schritt tun. Im zweiten Schritt empfehlen wir dir, dich kinesiologisch testen lassen (www.selbergesundwerden.com). Jedes ernste Problem hat eine gegenüberliegende aufbauende und heilende Schwingung, welche die negative abbauende, krankmachende Schwingung wieder neutralisiert. Um eine Krankheit zu korrigieren, müssen Körper, Geist und Seele sich energetisch gut auf dieses Ziel fokussieren. Dieses Ziel muss jedoch punktgenau getroffen werden, damit eine Resonanz entsteht. Zudem muss dieses Ziel sehr lange unterstützt werden, bis diese bisher sehr schwache biochemische Umsetzung (= Krankheit) auch energetisch verbessert werden kann. Dieses spezifische Ziel ist bei jedem Menschen anders. Deshalb testen wir individuell wie viele einzelne Frequenzen jeweils gebraucht werden. Danach erstellen wir mit diesen Daten ein neues Programm und stellen es auf dem Internet allen Benutzern zur Verfügung. Diese Programmierung ist kostenlos, nur der kinesiologische, individuelle Test muss bezahlt werden.

Die Resonanz ist technisch ebenfalls nicht messbar, sondern nur kinesiologisch. Es ist eine Reaktion von Körper, Geist und Seele auf eine Situation. Die Reaktion erfolgt auf eine starke Emotion, sowohl positiv wie auch negativ. Immer wenn man eine Gänsehaut bekommt, spürt man dies. Entweder mit Liebe bei einem schönen Konzert oder mit Angst in der Dunkelheit. Diese Resonanz-Reaktion kann man kinesiologisch auf jedes Thema abfragen. Es entsteht aber auf jede Frage nur dann eine Resonanz-Reaktion, wenn der Lösungsvorschlag eine „Gänsehaut“ auslöst. Alle unserer Therapie-Vorschläge auf www.selbergesundwerden.com basieren ausschließlich auf „Gänsehaut-Reaktionen“. Das bedeutet, dass wir nur Lösungsvorschläge präsentieren, bei denen Körper, Geist und Seele in Liebe mit der Lösung in Resonanz gehen.

Die NanoCampo-Matte ist unser wichtigster Baustein im Resonanzkonzept. Doch es braucht nebst der biophysikalischen Energie immer auch biochemische Bausteine, damit der Körper die energiereichen Informationen auch stofflich umsetzen kann. Dafür haben wir unsere FormSlim-Stoffwechsel-Komplexmittel (www.FormSlim.com) entwickelt. Die Jahrzehntelange Entwicklung basiert ebenfalls ausschließlich auf der kinesiologischen Resonanz. Wir empfehlen nicht nur eigene Produkte und Geräte, da wir über Jahrzehnte viele Technologien und Produkte getestet haben. Wir sind und bleiben für jede Lösung offen. Es ist uns nicht wichtig, woher ein Therapie- oder Produkte-Vorschlag kommt, sondern wir testen nur, ob der Vorschlag in Resonanz testet.

Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Das Resonanzsystem mit der NanoCampo-Matte und den FormSlim-Produkten kann dafür eine wichtige Stütze sein – besonders auch in der Prävention. Wer nicht nur gegen ein Problem arbeiten möchte, sondern sich energetisch und feinstofflich weiterentwickeln möchte, wird die vielen meditativen, energetischen, emotionellen und geistig-seelischen Wochenpläne schätzen. Wer gesund altern möchte, kann mit dem Resonanz-Konzept viel erreichen. Für eine stabile Gesundheit braucht es allerdings einen gesunden, wachen, lebendigen Geist, der es diesem Menschen ermöglicht von innen heraus richtig glücklich zu sein. Denn es ist bereits aus der Wissenschaft bekannt, dass Zellen auf Glücksgefühle positiv reagieren. Wir von NanoCampo können niemanden glücklich machen, sondern nur energiereicher. Jeder muss sein Leben selbst gestalten und selbst sein Glück suchen. Auch wenn das Glück selbst vergänglich ist, so ist glücklich sein, eine Grundhaltung. Wer mehrheitlich glücklich ist, lebt gesünder und auch länger. Das ist die Lebensaufgabe eines jedes einzelnen Menschen und diese wird von der NanoCampo-Matte bestens unterstützt.

1.1. Das Kristallwasser

Das Wasser hat nicht drei, sondern 4 Aggregatzustände: Eis, *geordnetes Kristallwasser*, Wasser und Dampf. Alles Leben ist vom hexagonal geordneten Kristallwasser abhängig. Ohne Ordnung existiert kein Leben. Sobald Wasser auf ein anderes Element stößt, geht es dort, wo der Kontakt entsteht, in eine Ordnung über. Im Zentrum, wo kein Kontrakt ist, bleibt das Wasser chaotisch. Durch diesen Unterschied zwischen Ordnung am Kontakt und Chaos im Zentrum, baut jede Zelle eine Spannung von 13,6 Microvolt im Innern auf. Diese Spannung braucht jede Zelle, um funktionieren zu können. Zudem benötigt sie die Energie für die Van-der-Waals-Kräfte (chemische Wechselwirkungen zwischen Atomen), welche es dem Körper erlaubt stabile Proteine zu falten. Da unser Nano-Biofeld der Matte schwächer ist, wie die Spannung des Kristallwassers, wirken die Elektronen rechtsdrehend und anabol aufbauend. Die NanoCampo-Matte ordnet innerhalb von Sekunden das gesamte Kristallwasser im Körper und reguliert damit die intrazelluläre Spannung aller Zellen. Durch diese bessere Ordnung können die Proteine in der Zellflüssigkeit wieder besser gefaltet und hergestellt werden. Es macht mit der NanoCampo-Matte keinen Sinn hexagonales Wasser zu trinken. Das Wasser muss nur frei von Giften sein. Die hexagonale Ordnung des Wassers macht die NanoCampo-Matte innerhalb von Sekunden kostenlos. Es macht auch keinen Sinn sich gegen linksdrehende Elektrosmog-Felder zu schützen. Alle linksdrehenden, krankmachenden Schwingungen vom Elektrosmog werden ebenfalls innert Sekunden rechtsdrehend neutralisiert. Nur wenn sehr starke linksdrehende Elektrosmog-Kräfte auf den Körper wirken, welche stärker sind, wie das NanoCampo-Biofeld, benötigt man zusätzlich einen Schutz mit Tervica-Produkten (siehe <https://formslim.com/>). Wer schwerwiegende Elektrosmog-Probleme hat, sollte sich immer von uns kinesiologisch testen lassen. Wer mehr zum Kristallwasser erfahren möchte, darf gerne unsere Wasserstudie lesen.

1.2. Das Mikrobiom

Im Mikrobiom, das etwa 1 kg Masse im Darm umfasst, sind mindestens 200-mal mehr DNA-Informationen gespeichert als im gesamten menschlichen Körper. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben nachgewiesen, dass diese DNA des Mikrobioms auf rechtsdrehende, positive Schwingungen von außen, wie zum Beispiel die Musik von Mozart, reagiert und den DNA-Stoffwechsel über Porphyrine und Sirtuine (beides sind Proteinverbindungen, die es benötigt um die Zellprozesse optimal zu steuern) nachweislich verbessert.

Die DNA des Mikrobioms teilt dem menschlichen Körper kontinuierlich über Exosomen (Nanopartikel, welche aus der Zelle ausgeschieden werden) ihre verbesserte Stoffwechsellage mit, wodurch diese Information an alle menschlichen Zellen weitergegeben wird. Wenn wir psychisch, emotional, geistig und

seelisch positiv gestimmt sind, teilen unsere Nerven, Neurotransmitter und Hormonzellen ebenfalls allen anderen Zellen über Exosomen ihre positive Stoffwechsellage mit. Jedoch hat das Mikrobiom eine weit größere Einflusskraft. Wenn es mehrheitlich negative Exosomen ausschüttet, beeinflusst das unsere gesamte Physiologie und Psyche stärker, als es unsere eigene emotionale Verfassung könnte. Ohne ein gesundes Mikrobiom ist es praktisch unmöglich, eine stabile, positive emotionale Stimmung zu erreichen.

Wir haben dieses Thema kinesiologisch getestet. Die NanoCampo-Matte wirkt durch ihre anabolen, rechtsdrehenden Schwingungen primär auf das Mikrobiom und verbessert damit indirekt unsere psychische Verfassung. Zudem unterstützt die NanoCampo-Matte das Mikrobiom und somit über deren Exosomen auch die Epigenetik in allen Zellen des Körpers. Sie unterstützt somit epigenetisch die qualitative Umsetzung der Stoffwechselprozesse zur Herstellung von Proteinen aus der DNA.

1.3. Die Emma-Kunz-Grotte

Die Emma-Kunz-Grotte befindet sich nur wenige Meter neben unserem Gesundheitszentrum in Würenlos. Sie gehört europaweit zu den wirksamsten Kraftorten und wird von vielen Menschen täglich besucht um sich dort energetisch aufzutanken. Diese Energieübertragung war uns ein Vorbild für die Entwicklung der NanoCampo-Matte. Wir wollten, dass jeder auf einem solchen Kraftort schlafen kann. Die Grotte erreicht einen Spitzenwert von 22'000 Baud (Die Baudrate ist ein Messwert in der Fernmeldetechnik). Wir haben bei der NanoCampo-System 5 Stärken programmiert und erreichen für die spirituelle Entwicklung sogar kinesiologisch gemessene Werte bis 24'900 Baud, also noch energiereicher als die Grotte selbst.

Baudraten-Vergleich: NanoCampo-Matte und Emma-Kunz-Grotte

Emma-Kunz-Grotte ca. 6'000 bis 10'000 Baud

Ebene: Dynamik für den Körper

NanoCampo-Stärke 500 = 10'600 Baud

Emma-Kunz-Grotte ca. 10'000 bis 14'000 Baud,

Ebene: Energetische Aufladung

NanoCampo-Stärke 400 = 16'200 Baud

Emma-Kunz-Grotte ca. 14'000 bis 18'000 Baud

Ebene: Aufladung der Chakras und Aura

NanoCampo-Stärke 300 = 20'700 Baud

NanoCampo-Stärke 200 = 21'900 Baud

Emma-Kunz- Grotte ca.18'000 bis 22'000 Baud

Ebene: Geistige Aufladung

NanoCampo-Stärke 100 = 24'900 Baud

Emma-Kunz-Grotte, nicht vorhanden

Ebene: Spirituelle Aufladung

Dieser kinesiologisch gemessene Baudratenvergleich gibt darüber Auskunft, mit wie vielen Reaktionen der Körper pro Sekunde auf das Nano-Bio-Feld der NanoCampo-Matte im Vergleich zur Emma-Kunz-Grotte, reagiert. Die NanoCampo-Matte verbindet die Zellen noch intensiver mit dem Universum wie die Emma-Kunz-Grotte. Die Zellen verbinden sich dank der NanoCampo-Matte pro Sekunde bis zu ca. 24'900mal mit dem Universum. Zum Vergleich: im Normalzustand interagiert der Körper zwischen 2'000 – 3'000mal pro Sekunde. Die Emma-Kunz-Grotte erhöht die energetische Schwingung der Zellen bis ca. 8mal. Die NanoCampo-Matte hingegen erhöht sie bis ca. 10mal und überträgt zusätzlich natürliche Frequenzen in den Körper, mit denen eine Resonanz entstehen kann. Die Schwingungserhöhung ist die energetische Wirkung, die Resonanz ist die therapeutische Wirkung der NanoCampo-Matte.

Der Körper reagiert anabol, stärkend und aufbauend, wenn die Elektronenquelle schwächer ist, wie der Micro-Strom in der Zelle (Kristallwasser und chaotisches Wasser). Nach der Arndt-Schulz-Regel wirkt alles, was schwächer ist wie dieser Microstrom, stärkend, also umgekehrt. Somit ist die tiefste Stärke gleichzeitig auch unsere spirituell wirksamste. Die 5 Stärken sind in unseren Wochenplänen automatisch einprogrammiert. Bitte die Stärken in der NanoCampo-APP nur in Zusammenarbeit mit einem Therapeuten individuell verändern und einstellen.

1.4. Erklärung der Funktionsweise

Die Funktionsweise der NanoCampo-Matte ist einzigartig. Wir senden Frequenzen zwischen 0 und 1 Million Hertz mit ultrafeinen NanoSchwingungen im Nanovolt-Bereich über ein Biofeld auf den Körper. Da das Biofeld schwächer ist wie der Microstorm der Zelle, wirken wir anabol stärkend, es ordnet sich sofort das Kristallwasser und die Zellen werden harmonisiert. Gleichzeitig werden alle linksdrehenden Schwingungen neutralisiert. Da wir die Frequenzen in jeweils 5 verschiedenen Nano-Stärken auf den Körper einwirken lassen können, entstehen Resonanzen, die zwischen 10'600 bis 24'900 mal pro Sekunde mit dem Universum in Kontakt treten können. Dies ist die **energetische Wirkung** der NanoCampo-Matte.

Bei den Resonanzreaktion können die Informationen zwischen dem Universum und den Zellen auf verschiedenen Ebenen ausgetauscht werden. Ein solcher Informationsaustausch mit dem Universum kann in der Zelle wiederum Quantenreaktionen als Antwort auslösen. Diese Quantenreaktionen ist die

therapeutische Wirkung in der Zelle. Dies nennen wir **Heilung**. Die NanoCampo-Matte erhöht somit die Energie in der Zelle damit sie intensiver und besser mit dem Universum kommunizieren kann, was wiederum, gemäss unseren Studien, eine durchschnittlich ca. 6 mal höhere Dichte an Quantenreaktion in den Zellen auslösen und somit die **Heilung** besser unterstützen kann. Die Stärke der Nanoschwingung ist entscheidend auf welcher körperlichen, mentalen, geistigen oder seelischen Ebene die Resonanz, die Informationübertragung und somit die **Heilung** stattfinden kann. Wir haben kinesiologisch nicht nur herausgefunden, dass im Nanobereich alle Frequenzen anabol, stärkend und rechtsdrehend sind. Wir haben auch festgestellt, dass die **gleiche Frequenz**, mit jeweils einer **anderen Stärke**, auf verschiedenen körperlichen, mentalen, geistigen oder seelischen Ebenen wirken kann.

**Unsere Schlussfolgerung ist,
dass die Energie-Erhöhung der NanoCampo-Matte,
die Informationsübertragung von der Zelle zum Universum erhöht,
und damit die entsprechende Antwort des Universums verbessert,
was eine mögliche Quantenreaktionen (Heilung) in der Zelle auslösen kann,
welche nicht nur von der jeweiligen Frequenz abhängt,
sondern besonders auch von der Schwingungs-Stärke der Matte selbst,
welche damit eine jeweils andere Wirkungsebene unterstützt.**

1.5. Mit NanoCampo Anderen helfen.

Für viele Therapeuten, die es gewohnt sind in ihrer Praxis die Klienten direkt gegen ein Problem zu behandeln, ist die NanoCampo-Therapie eine völlig neue Dimension. Nur wenige Therapeuten haben bisher konsequent für die Gesundheit gearbeitet. Die meisten haben ihren Fokus vielmehr auf die Krankheiten gerichtet. NanoCampo wirkt hingegen nur anabol und aufbauend. Keine einzige Krankheit kann mit NanoCampo bekämpft werden. NanoCampo stärkt nur die Energie in den Zellen, damit der Körper sich selbst stärken kann. Das ist eine komplett neue Denkweise. NanoCampo kämpft zum Beispiel nicht gegen Erreger wie Viren und Bakterien, sondern unterstützt direkt anabol, aufbauend das Immunsystem, damit das Immunsystem die Viren und Bakterien besser selbst bekämpfen kann.

Therapeuten müssen mit der NanoCampo-Matte ihre Klienten anders betreuen. Die Klienten sollten die anabol aufbauende Wirkung unserer NanoCampo parallel zur bisherigen Therapie in ihrer Praxis ausprobieren können. Dafür muss der Klient direkt auf der Matte und einem Hygiene-Tuch liegen. Der Klient sollte, wenn er überzeugt ist, das System beim Therapeuten kaufen und über Nacht zu Hause anwenden. Eine anabol, aufbauende Unterstützung dauert länger, als eine abbauende oder regulative Therapie. Deshalb kann der Therapeut den Klienten mit der NanoCampo-Matte nicht in seiner Praxis

therapieren, sondern ihn nur beraten und begleiten. Sein Klient braucht jeweils die Nacht, in der er seine 6-8-stündige Therapie durchführen kann.

Wir suchen Therapeuten und Berater, die ihre Klienten dabei unterstützen möchten, ihre Verantwortung für ihre Gesundheit selbst zu übernehmen. Wir suchen Menschen, die primär das Wohl ihrer Klienten im Fokus haben. Jeder so denkende Mensch ist bei uns herzlich willkommen. Ob Anfänger oder Profi - wir können jeden so unterstützen, wie er es braucht. Viele Anwender sind von unserem Resonanz-Konzept überzeugt. Wenn du auch davon überzeugt bist, dann hast du bei uns die Möglichkeit ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Wir empfehlen dir zuerst unser Videoreihe anzuschauen:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PL4kVPEQHH3B2m4a4QPTIj3bK6frVVjYmY> .

Wenn du gerne anderen Menschen im Gesundheitsbereich helfen möchtest, kannst Du Dich von uns kostengünstig als Formslim-Berater weiterbilden zu lassen: <https://kurse.selbergesundwerden.de/> . Mit dieser Ausbildung kannst du einfach den Grundstein zu einem neuen Berufsweg legen.

1.6. Verwendung des NanoCampo-Systems bei einer Krankheit

Das NanoCampo-System stärkt alle Zellen. Es unterstützt den physiologischen Wiederaufbau und die Reparaturen aller Zellen. Bei jeder akuten Erkrankung sollte zusätzlich immer ein Arzt aufgesucht werden. Man sollte bei jedem starkem gesundheitlichen Problem, nebst dem NanoCampo-System, zusätzlich auch noch andere Therapien in Erwägung ziehen oder ein Arzt aufsuchen. Bei allen chronischen Problemen ist das NanoCampo-System eine sehr gute Unterstützung. Sie stärkt biophysikalisch den Wiederaufbau der Zellen, jedoch benötigt man parallel dazu immer auch noch biochemische Naturprodukte, am besten von <https://formslim.com/> .

1.7. Kinesiologische Testung, Abonnement und Anwendung bei Tieren

Wir empfehlen allen Benutzern der NanoCampo-Matte, sich regelmäßig kinesiologisch testen zu lassen. Es wäre bedauerlich, wenn Programme ungetestet angewendet werden, bei denen der Körper nicht in Resonanz geht. Wer sogar ein Abonnement bei FormSlim abschließt (<https://formslim.com/Stoffwechsel-Komplexmittel/Abos/>), kann nicht nur bis zu 10 % Rabatt auf alle FormSlim-Produkte erhalten, sondern bekommt auch einen umfassenden Therapievorschlag für die gesamte Familie sowie deren Tiere (maximal zwei). Pferde, Hunde und Katzen werden in einem dafür spezialisierten Resonanz-Zentrum getestet.

Dieser Therapievorschlag basiert auf den Antworten des Unterbewusstseins in Bezug auf die angegebenen Symptome. Zusätzlich erhalten NanoCampo-Besitzer für jedes Familienmitglied separat (inkl. zwei Tiere) die passenden NanoCampo-Wochenpläne (über 400 stehen zur Verfügung).

NanoCampo-Nutzer, die sich mit dem Abonnement regelmäßig kostenlos testen lassen, bekommen monatlich eine individuell abgestimmte NanoCampo-Programm-Zusammenstellung (über 400 Programme stehen zur Verfügung). Diese Zusammenstellung repräsentiert sowohl in der Intensität als auch in den Frequenzen die persönliche Resonanz des Anwenders. Die biophysikalische Resonanz-Übertragung unterstützt alle Körperzellen so effektiv, dass der Klient deutlich weniger Stoffwechselprodukte benötigt. Mit der Zeit finanzieren die Einsparungen bei den Produkten und damit auch bei den Kosten, bald den Preis der Matte sowie des Abos selbst.

2.0. Das NanoCampo-Handbuch


2.1. Die Zusammensetzung des NanoCampo-Systems

Das NanoCampo-System besteht aus:

- NanoCampo-Matte, 65x190cm, für Anwendungen primär in der Nacht



- Steuerungsgerät, mit Bajonett-Anschluss für die Matte und USB-C-Anschluss für das Stromkabel oder für die Verbindung mit dem Android-Handy oder -Tablet

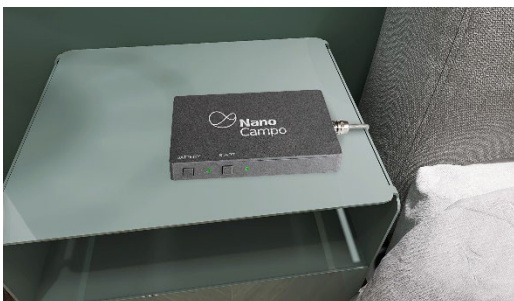

- 220-Volt-Stecker mit USB C-Kabel

- Zusätzlich erhältlich für die Therapie am Tag:
Sitzmatte, 40x50cm, für Anwendungen primär am Tag



- Klemmen, um die Sitzmatte und Steuerungsgerät zu befestigen.



2.2. Sicherheitsbestimmungen und Garantie

Bitte lies die Sicherheitsbestimmungen durch, welche dem Steuerungsgerät beigelegt wurden.

Hier werden nochmals die wichtigsten Punkte erwähnt:

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Ab 2000 Meter über Meer ist die Erdanziehung für die NanoCampo-Matte zu schwach. Die Elektronen des Nano-Biofeldes können kein homogenes Feld mehr aufbauen. Wir können deshalb ab 2000 Meter über Meer für die Wirksamkeit der NanoCampo-Matte nicht mehr garantieren.

Das Gerät darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Die Ladetemperatur der Batterie beträgt zwischen 10 und 40 Grad Celsius. Die Benutzung des Gerätes bei anderen Temperaturen kann dem Gerät einen Schaden zufügen und gilt als unsachgemäße Benutzung. Das Gerät muss als elektrisches Gerät entsorgt

werden. Weder das Steuerungsgerät noch die Matten benötigen eine Wartung.

Sollte die Batterie auslaufen oder das Steuerungsgerät einen Schaden genommen haben, so bitten wir sie das Gerät außer Betrieb zu nehmen. Es ist untersagt, das Gerät zu öffnen. Es ist nur autorisierten Personen erlaubt, die Batterie auszuwechseln. Jedes Öffnen des Steuerungsgerätes gilt als unsachgemäße Handlung, wodurch unsere Garantieleistung sofort verfällt.

Sollte das NanoCampo-System einmal defekt sein, bitte zuerst an Info@NanoCampo.ch ein Mail schreiben. Wir benötigen die Beschreibung des Problems sowie die Seriennummer und die Liefer-Adresse. Wir teilen danach per Mail mit, wie wir das Problem umgehend lösen werden. Bitte immer die Originalverpackung behalten und nicht wegwerfen. Die Matten dürfen nicht gefaltet, sondern nur gerollt werden. Die Übertragungstechnik kann bei einer Faltung Schaden nehmen. Bei jeder unsachgemäßen Benutzung verfällt die Garantieleistung. Alle Matten sowie Ersatzteile werden während der Garantiezeit von 2 Jahren kostenlos ersetzt, solange sie nicht gefaltet, unsachgemäß behandelt oder anderweitig zerstört wurden.

NanoCampo kann auch für Tiere angewendet werden. Für Therapien mit Pferden sowie mit Haustieren, bitte den Therapeuten kontaktieren.

2.3. Voraussetzungen für die Installation

- Android-Handy oder -Tablet (Ab Systemversion 2017) mit Internet-Verbindung oder WLAN oder
- Internetverbindung oder WLAN mit (Windows, Mac, Iphone) **und** Android- Handy oder -Tablet (ohne Internet und WLAN)

Die APP funktioniert nur auf einem Android- Handy oder -Tablet. Das WLAN (Internet) kann entweder direkt auf dem Android-Handy oder -Tablet eingerichtet werden oder mit jedem andern WLAN-fähigen Gerät dem Android- Handy oder -Tablet zur Verfügung gestellt werden.

Beim WLAN muss beim Benutzen der NanoCampo-App ,die VPN-Verbindung immer deaktiviert sein. Jede VPN-Software hat andere Parameter, was es unmöglich macht in allen Fällen eine sichere Verbindung zum Datenserver zu garantieren. Bitte bei der Benutzung der NanoCampo-APP immer das VPN ausschalten.

Wer sich technisch nicht in der Lage sieht, diese Installationen zu machen und niemand kennt, der dabei helfen könnte, kann das Steuergerät mitnehmen und den nächsten NanoCampo-Therapeuten

vorbeibringen oder den Postservice benutzen. Der Therapeut lädt dir gerne die richtigen Programme auf dein Steuergerät.

2.4. Hardware-Anschlüsse

Um das Steuerungsgerät aufzuladen, steckt man den C-Stecker in das Steuerungsgerät und das andere Ende mit dem Stecker in ein 220 Volt-Steckdose. Wer kein Elektrosmog-Problem hat, belässt die Installation fix installiert unter der Bettmatratze. Wer ein Elektrosmog-Problem hat, arbeitet in der Nacht über die Batterie und lädt diese wieder am Tag neu mit dem Stromkabel auf.

Um das Steuerungsgerät mit dem Android-Handy- oder Tablet zu verbinden, verbindet man beides direkt mit dem Kabel und den beiden C-Stecker.

Um das Steuerungsgerät mit der Matte zu verbinden, steckt man den Bajonettverschluss an der Matte an.

2.5. Software

Alle Software-Entwicklungen werden im Internet auf dem Nano-Campo-Server konstant aktualisiert. Jedes Mal, wenn man sich neu einloggt, stehen immer wieder die aktuellen Wochenpläne oder individuelle Programme zur Verfügung. Somit ist jedes NanoCampo-System, kostenlos und automatisch, immer auf dem neusten Stand. Wer ein spezielles Gesundheitsproblem hat und kein geeignetes Programm dafür findet, kann auf www.selbergesundwerden.com ein Ticket lösen. Oder man wendet sich direkt vor Ort an einen Therapeuten in einem kinesiologischen Resonanz-Zentrum, der dies testen kann. Sollte das Programm noch nicht existieren, so wird es von uns kostenlos programmiert und allen Benutzern wieder auf dem Internet zu Verfügung gestellt.

2.6. Vorbereiten der Installation:

- Android-Handy oder -Tablet am Strom aufladen.
- NanoCampo Steuergerät am Strom aufladen.
- APP auf Android-Handy oder -Tablet installieren.

Du findest die NanoCampo-APP auf dem Internet im Google Play Store unter den APP's mit dem Suchwort: NanoCampo.

2.7. Installation und Benutzung der NanoCampo-Matte

Die NanoCampo-Matte (65x190cm) sollte unter der Matratze gelegt werden. Ideal ist der Höhen-Abstand zum Benutzer zwischen 15cm und 30cm. Das Steuerungsgerät an der Matte einstecken und so am Bettende (oder am Bettkopf) verstauen, damit man die Matte leicht bedienen kann. Für die Installation mit

dem Android-Handy oder -Tablet kann das Steuerungsgerät auch ausgesteckt und später wieder angesteckt werden.

Wer ein Boxspring- oder ein Wasserbett hat, sollte die NanoCampo-Matte auf das Bett legen und einen 15cm dicken Topper darüberlegen. Wer eine sehr dünne Matratze hat, kann die NanoCampo-Matte (vor verletzenden Einflüssen geschützt) unter dem Bettrost auf dem Boden installieren. Dies aber nur, wenn es keine Federkern- oder Boxspring- oder andere Matratze mit Metallinhalt dazwischen vorhanden ist. Das Metall leitet leider unsere feinen Nano-Schwingungen um.

Bei Doppelbetten sollten sich, wenn möglich, die beiden Matten nicht berühren. Das Doppelbett sollte deshalb mindestens 140cm breit sein.

Wer am Tag auf der NanoCampo-Matte therapieren möchte, sollte sie unter der Matratze hervorheben und sich direkt darauf therapieren. Am Tag benötigen wir viele Elektronen und deshalb einen direkten Kontakt zum Körper, um den Sympaticus zu aktivieren. In der Nacht benötigen wir weniger, aber dafür homogenere Elektronen. Deshalb brauchen wir einen größeren Abstand zum Körper, um den Parasympaticus über Nacht zu beruhigen.

Anwendung in der Nacht (mit nur den Steuerungsgerät)

Immer, wenn man ins Bett geht, den Knopf «Start» drücken. Das ist schon alles. Die Zeiteinstellung ist so gewählt, dass die Matte immer über Nacht läuft (zwischen 12h mittags zu 12h mittags). Das Steuerungsgerät ist so programmiert, dass es weiß, welcher Tag es ist und übernimmt automatisch das jeweilige Tagesprogramm aus dem Wochenplan. Wer im Batteriebetrieb arbeitet, sollte vorher prüfen, ob die Batterie noch grün leuchtet. Bei Orange kann es bereits sein, dass es nicht für eine ganze Nacht reicht. Bei Rot ist die Batterie nicht aus reichend. Wenn kein Wochenplan oder kein individuelles Programm auf der Matte gespeichert ist und man «Start» drückt, leuchtet die Lampe Rot.

Anwendung an Tag (mit Steuergerät und Android-Tablet oder -Handy)

Wer regelmäßig am Tag therapiert, dem empfehlen wir zusätzlich eine Sitzmatte (40x50cm). Mit der Sitzmatte ist es möglich am PC zu arbeiten, im Sessel zu lesen oder auf dem Fauteuil fernzusehen und sich gleichzeitig zu therapieren. Das Steuerungsgerät kann mit speziellen Klemmen (auf dem shop erhältlich) überall festgemacht werden.

Wer am Tag mit einer der beiden Matten arbeitet, kann dies direkt mit dem Android-Handy- oder Tablet machen. Das Android-Handy- oder Tablet wird am Steuerungsgerät angeschlossen und die Programme

werden direkt Android-Handy- oder Tablet auf die Matte geschickt, ohne die Daten auf dem Steuerungsgerät zu überschreiben. Der Vorteil ist, dass man die gespeicherten Programme für die Nacht, bei dieser direkten Anwendung nicht überschreibt. Das ist besonders für Therapeuten sowie die Therapien am Tag wichtig. Bei jeder Änderung des Wochenplans oder des individuellen Programms, muss das WLAN aktiviert werden.

Einschlafprobleme

Wenn man nicht gut einschlafen kann, hat man die Möglichkeit den Wochenplan nicht sofort, sondern über einen Timer, bis 60 Minuten später starten zu lassen. Während dieser Zeit blinkt das Steuerungsgerät. Alle Menschen schlafen besser und tiefer auf der Matte und erholen sich damit auch schneller. Doch spürt man diese Wirkung nicht sofort. Die Wirkung ist abhängig von der Menge der anstehenden Reparaturen. Je mehr Reparaturen der Körper noch machen muss, je länger geht es, bis man diese Erholung spürt. Sind diese noch nicht abgeschlossen, kann der Körper noch nicht wirklich in Erholung gehen. Bei sehr schweren Fällen kann dies bis zu 6 Monate dauern.

Erst-Reaktionsprobleme

Wenn die Wirkung der Matte auf eine sehr starke Reaktion auslöst, kann es sein, dass man am Anfang nicht gut einschlafen kann, weil dein Körper sofort in die Reparatur geht. Die hohe Baudraten-Frequenzen und Verbindungen mit dem Universum können, wie bei der energetischen Nutzung der Emma-Kunz-Grotte, zu einer Erst-Reaktion führen. Das zeigt, dass du in Resonanz gehst. Bitte in diesem Fall, dich mindestens eine Woche lang, während mehreren Stunden nur am Tag behandeln. Man muss warten, bis der Körper die wichtigsten Reparaturen gemacht hat und die starken Reaktionen nachlassen. Wenn man am Tag nicht mehr reagiert, kann man in der Regel danach, mit der NanoCampo-Matte perfekt schlafen. Bei der Emma-Kunz-Grotte reagieren die empfindlichen Menschen ebenfalls auf hohe Baudraten. Diese Reaktion ist nicht gefährlich, sondern wie bei der Grotte, nur eine Erstreaktion. Sobald Körper, Geist und Seele sich daran gewöhnt haben, auf so hohen Baudraten zu kommunizieren, können sie die Reorganisation, Reparatur und Stärkung des Körpers richtig vornehmen.

Das NanoCampo-Therapie-Konzept

Alle Benutzer arbeiten primär mit den Wochenplänen. Die Wochenpläne sind einfach zu suchen und können mit einem Klick auf die APP heruntergeladen werden. Wer ein spezielles Gesundheitsproblem hat und kein geeigneten Wochenplan dafür findet, kann auf www.selbergesundwerden.com ein Ticket für einen Therapievoranschlag lösen. Oder man wendet sich vor Ort an einen Therapeuten in einem kinesiologischen Resonanz-Zentrum, der dies testen kann. Je spezifischer das Gesundheitsproblem ist, je genauer müssen

die Frequenzen stimmen, damit eine Resonanz entsteht. Um ein spezifisches Problem zu unterstützen, benötigt es wenig Frequenzen, diese müssen aber zu 100% in Resonanz gehen.

Bitte keine individuellen Programme anwenden ohne kinesiologischen Test und ohne Begleitung eines NanoCampo-Therapeuten. Die Programme haben absichtlich nur Nummern. Nur der Therapeut weiß, welche Nummer für welche Therapie steht. Wir möchten damit verhindern, dass die Benutzer mit für sie wenig wirksamen Programmen arbeiten. Wenn keine Resonanz entsteht, wirkt zwar das Nano-Biofeld (Kristallwasser + rechtsdrehende Schwingungen) auf alle Zellen, doch die zielgerichtete Therapie auf die entscheidenden Zellen findet nicht statt. Es entsteht kein Schaden für den Benutzer. Aber das spezifische Problem wird, ohne die richtigen Resonanz-Frequenzen, zu wenig zielgerichtet unterstützt.

Der Start mit den Wochenplänen

Alle Benutzer sollten zuerst während mindestens 1 Woche jede Nacht entgiften. Dafür gibt es vier Wochenpläne zur Auswahl:

- a) Zuerst 3 Tage **Entgiftung Allgemein** und dann 4 Tage **Entgiftung Generell**, wenn keine nennenswerten Gesundheitsprobleme vorhanden sind.
- b) **Entgiftung bei Allergie**, bei Immunschwächen (7 Nächte).
- c) **Entgiftung bei Elektrosensibilität**, bei Nervenschwächen (7 Nächte)..

3.0. Die NanoCampo-Gebrauchsanweisung

3.1. Kurzfassung der NanoCampo-Gebrauchsanweisung

Bitte verwende das separate File oder die separaten Videos, um dich einfacher und anders zu informieren. Wenn du mehrere Nano-Campo-System mit einer Email-Adresse anmelden möchtest, dann findest du dafür ein eigenes Video.

3.2. Gebrauchsanweisung Normalfassung

WICHTIG:

Wer ein Android-Tablet oder Handy mit Netzanschluss (Internet) besitzt, kann die gesamte NanoCampo-Anwendung damit durchführen und somit alles sehr einfach mit nur einem Gerät umsetzen.

Auf dem Internet als Besitzer registrieren

Registrieren auf [https:// http://nanocampo.ch/anmelden](https://http://nanocampo.ch/anmelden) (auf <https://nanocampo.ch/> ist oben rechts der Button)

Bitte nur die Zahlen der Seriennummer mit Bindestrich eingeben (keine Buchstaben)

Bitte den richtigen Namen und Vornamen eingeben (keine Phantasiewörter). Wir registrieren den Garantiebeginn ab dem Datum der Anmeldung und können Phantasienamen niemandem zuweisen.

1. Wähle zuerst die Sprache
2. Gehe auf: «als Besitzer registrieren».

Wenn du versucht ohne Registration dich einzuloggen, kommt eine Fehlermeldung)

3. Bitte alle Felder ausfüllen und auch die Seriennummer (ohne Buchstaben) vom Steuergerät eintragen. Bei einer Fehlermeldung bitte dies an: info@nanocampo.ch melden. Nur registrierte Besitzer können Benutzer werden. Nur Benutzer können Wochenpläne und Programme verwalten.
4. Du erhältst nun ein Mail (bitte auch im Spamordner nachschauen). *Dieses Mail aufbewahren. Es ist dein Zugang als Besitzer und Eigentümer zu unserer Plattform. Du kannst dich immer nur als Besitzer einloggen.*

Auf dem Internet-Portal als Besitzer wieder einloggen

Du hast nun 3 Möglichkeiten, wie du weiterarbeiten kannst:

1. Du möchtest noch mehr Besitzer (Eigentümer) anmelden.

Du möchtest mit deiner eigenen E-Mail-Adresse noch weitere Besitzer anmelden. Du verwaltest zum Beispiel über deine E-Mail-Adresse alle NanoCampo-Systeme deiner Familie oder du bist Besitzer vieler matten. **Schau dir bitte das separate Video an.**

2. Du bist Privatperson und möchtest nur dich als Benutzer anmelden.

Geh auf «als Besitzer einloggen». Gib wieder deine E-Mail-Adresse sowie Seriennummer an(welche du gespeichert oder per E-mail erhalten hast)
Danach erfasst du dich hier selbst als Benutzer (oben links). Du erfasst dich mit deiner E-Mail-Adresse und mit Namen und Vornamen. Danach wählst du diesen Benutzer an. **BITTE WÄHLE DEIN EIGENES PASSWORT ODER SCHREIBE DAS VORGESCHLAGENE PASSWORT AUF ODER SICHERE ES AUF DEINEM PC.** Du erhältst nun ein Mail als **Benutzer**.

3. Du bist Therapeut und möchtest mehrere Benutzer (Klienten) anmelden.

Geh auf «als Besitzer einloggen». Nun erfasst du dich hier selbst als Benutzer (oben links). Jeden deiner

Klienten erfasst du mit deiner eigenen E-Mail-Adresse aber mit Namen und Vornamen des Klienten (Bitte immer die gleiche E-Mail verwenden, aber den Namen ändern). Als Therapeut kannst du mit deiner Email-Adresse und deinem Passwort so viele Benutzer anlegen wie du möchtest. **BITTE WÄHLE DEIN EIGENES PASSWORT ODER SCHREIBE DAS VORGESCHLAGENE PASSWORT AUF ODER SICHERE ES AUF DEINEM PC.** Für jeden neuen Klienten erhältst du ein Mail als **Benutzer**.

Solltest du dein Passwort vergessen haben, dann bearbeite den Benutzer und erstell ein neues Passwort. Wenn du einen Benutzer löschen möchtest, dann lösche ihn (mit allen gemachten Programmen und seiner Chronologie). In beiden Fällen erhältst du ein neues Mail als **Benutzer**. Das **Besitzer-Passwort (Eigentümer)** hast du im ersten Mail nach deiner der Registration erhalten.

DU LOGGST DICH AUF DEM INTERNET IMMER ALS BESITZER EIN UND SCHICKST DANN ALLE PROGRAMME ALS BENUTZER AUF DIE APP. DIE APP KENNT KEINEN BESITZER – NUR BENUTZER.

Auf dem Internet deinen Wochenplan wählen

- Oben links: Pläne anwählen
- Wenn du nicht direkt am PC die Wochenpläne aussuchen möchtest, kannst du alle aktuellen Wochenpläne in Excel exportieren und ausdrucken.
- Schreibe in das Feld der Wochenpläne ein Stichwort (Suchwort, zum Beispiel Schmerzen) rein. Bei jedem Wort kommen alle Plan-Vorschläge, welche dafür in Frage kommen können. Du musst dich immer nur auf einen Wochenplan konzentrieren. Du kannst keine 2 Wochenpläne miteinander anwenden.
- Wähle den Wochenplan aus, welcher dir am ehesten zusagt.
- Drücke: Wochenplan auf das App laden
- Es werden konstant neue Wochenpläne entwickelt und raufgeladen. Es lohnt sich immer wieder sich hier zu informieren, was für neue Wochenpläne vorhanden sind. Alle Wochenpläne regulieren und stärken den Körper.
- Die benutzerdefinierten Programme können nur zusammen mit NanoCampo-Therapeuten angewendet werden. Die benutzerdefinierten Programme werden individuell und spezifisch auf nur **eine** ganz bestimmte körperliche Schwäche ausgelegt. Keine zwei Menschen erhalten dabei die gleichen spezifischen Programme empfohlen. Wende dich an deinen Therapeuten und lass kinesiologisch austesten, mit welchen Programmen du in Resonanz gehst und somit auch runterladen sollst. Wenn du keinen Therapeuten hast, dann lass dich hier testen:

<https://selbergesundwerden.de/>

- Wenn du eine «alten Wochenplan wieder aktivieren möchtest, so wähle diesen in der Chronologie an und lade den Wochenplan auf die APP runter.

Die APP auf dem Android-Handy- oder Tablet anwenden

- *BITTE BEACHTE, DASS WENN DU EIN PROGRAMM AUF DAS STEUERGERÄT LADEN MÖCHTEST, SOLLTE DAS STEUERGERÄT IMMER AUFGELADEN SEIN, DARF ABER GLEICHZEITIG **NICHT** LAUFEN. WENN BEIM RUNTERLADEN DAS PROGRAMM IMMER STEHEN BLEIBT, DANN SOLLTEST DU ZUERST AM STEUERGERÄT 4 SEKUNDEN AUF „START“ DRÜCKEN UND ES DAMIT AUSSCHALTEN. ZUR KONTROLLE KANNST DU KURZ DEN BUTTON BATTERIE DRÜCKEN. DER BUTTON „START“ MUSS DUNKEL BLEIBEN. DANN IST DAS STEUERGERÄT FÜR DIE PROGRAMMSPEICHERUNG BEREIT.*
- Das Handy/Tablet über das Kabel mit dem Steuergerät verbinden.
- Wenn man das Android-Handy oder Tablet an das Steuerungsgerät angeschlossen wird, leuchtet die «Start»-Lampe kurz blau. Das zeigt an, dass das Steuerungsgerät das Handy oder Tablet erkannt hat.
- WLAN (oder Internetverbindung) am Android-Handy oder Tablet (oder anderweitig) anstellen.
- Auf dem Handy/Tablet die APP öffnen
- Danach Sprache auswählen, deine E-Mail-Adresse + dein gewähltes **Benutzer-Passwort** eingeben und Anmeldung drücken.
BITTE BEACHTE, DASS DU AUF DER APP IMMER NUR DEIN BENUTZERPASSWORT NIMMST. DIE APP KENNT KEINE BESITZER (EIGENTÜMER)!
- Wenn du mehrere Benutzer mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen mit der APP verwaltest, dass kannst du mit dem Passwortmanage von Google bestens verwalten.
- USB-Gerät NanoCampo anwählen. Wenn es den USB nicht findet, ist das Verbindungs-Kabel nicht richtig angebracht worden.
- Wenn du aktualisieren möchtest, dann drücke rechts oben das entsprechende Zeichen (Pfeil).
- Zeit einstellen: Ein Durchlauf dauert im maximum 260 Min. Je schwächer du bist, je länger solltest du die Laufzeit einstellen. Wenn du dich nicht testen lässt, stell alles intuitiv ein. Es kann kein Schaden entstehen. Es ist ungefährlich sich zu lange zu behandeln. In der Regel spürt man, wenn man weniger Therapiedauer benötigt.
- Die Stärke-Reglung ist immer auf **automatisch** eingestellt. Bitte ohne Unterstützung hier nichts verändern. Die manuelle Stärkeregelung ist nur für Therapeuten. Die Stärken sind fixfertig programmiert. Bitte nur unter Anleitung eines Therapeuten diesen Stärkereglern verändern.

- Du solltest nur den **individuellen** Stärkeregler (Schieber) anwenden. Du kannst zwischen 10% bis 500% wählen. Es ist hier umgekehrt. Je weniger Prozent du einstellst, je stärker wirkt es. Wer also empfindlich reagiert sollt den individuellen Regler hochstellen (nicht tief).
- Therapiewiederholung einstellen: 1x, 2x, 3x. Die minimale Therapiedauer ist 1 x 42 Minuten (am Tag), die maximale Therapiedauer ist 3 x 260 Minuten und somit 780 Minuten (=13 Stunden in der Nacht). Je grösser dein gesundheitliches Problem ist, je länger solltest du dich therapieren. Wir empfehlen in der Nacht mindestens 2 x die Wiederholung einzustellen, damit die Wirkung am bestens ist. Rechne selbst aus wie lange du im Durchschnitt schläfst.
- Bei 8 Stunden sind dies 480 Minuten. Somit würdest du die Zeit (oben) auf 240 Minuten und 2 x die Wiederholung wählen.
Bei 6 Stunden sind dies 360 Minuten. Somit würdest du die Zeit (oben) auf 180 Minuten und 2 x die Wiederholung wählen.
Bei 4 Stunden sind dies 240 Minuten. Somit würdest du die Zeit (oben) auf 120 Minuten und 2 x die Wiederholung wählen.
- Weniger als 4 Stunden pro Nacht empfehlen wir nicht.
- Programm auf die Matte speichern.
- **SOLLTE BEIM HERUNTERLADEN EIN FEHLER ANGEZEIGT WERDEN, DANN KONNTEN NICHT ALLE PROGRAMMDATEN RUNTERGELADEN WERDEN. BITTE WLAN ÜBERPRÜFEN. BITTE VPN DEAKTIVIEREN.**
- **DANN AUS DER APP AUSLOGGEN UND WIEDER EINLOGGEN. NUN AKTUALISIERUNG OBEN RECHTS DRÜCKEN. DANN NOCHMALS DAS PROGRAMM AUF DIE MATTE SPEICHERN.**
- **SOLLTE DIE APP DAS STEUERGERÄT NICHT VERBINDEN KÖNNEN, BITTE IM GOOGLE PLAY-STORE DIE APP DE- UND WIEDER RE-INSTALLIEREN.**
- **SOLLTE DIE VERBINDUNG ZWISCHEN STEUERGERÄT UND APP IMMER NOCH NICHT FUNKTIONIEREN, DANN IST DAS STEUERGERÄT BLOCKIERT. UM DIES ZU LÖSEN, MÜSSEN DIE DATEN AUF DEM STEUERGERÄT GELÖSCHT WERDEN. BITTE DAS STEUERGERÄT OHNE STROM CA. 24 STUNDEN LAUFEN LASSEN, BIS DER BATTERIEBUTTON GAR KEIN LICHT MEHR ZEIGT (ALSO AUCH KEIN ROT MEHR). DANACH, WIEDER DAS STEUERGERÄT AUFLADEN UND ALLES FUNKTIONIERT.**
- Tablet vom Steuergerät trennen und das Steuerungsgerät mit dem Bajonettverschluss an der Matte anschliessen
- WLAN im Schlafzimmer abstellen

Mit der APP und dem Handy oder Tablet direkt die Matte steuern

- Statt den Wochenplan auf das Steuerungsgerät runterzuladen, wählt man: Programm direkt mit der APP anwenden. Dafür muss aber das Steuerungsgerät mit dem Handy oder Tablet über das Kabel verbunden bleiben. Dabei werden die gespeicherten Wochenpläne auf dem Steuerungsgerät NICHT überschrieben, sondern das gewählte Programm wird direkt auf die Matte übertragen.

Das Steuerungsgerät mit der Matte anwenden

- Das Steuerungsgerät muss immer über den Bajonettverschluss mit der Matte oder der Sitzmatte verbunden sein.
- Wer keine Elektromog-Empfindlichkeit hat, kann das Steuerungsgerät gleichzeitig am Strom angeschlossen lassen. Wer empfindlich ist, sollte in der Nacht über die Batterie arbeiten und am Tag die Matte am Strom wieder aufladen. Der Elektromog des Anschlusses ist äusserst fein und nicht mehr messbar. Nur sehr empfindliche Menschen brauchen eine Anwendung über die Batterie.
- «Batterie» am Steuergerät zeigt, wie lange es ohne Strom noch funktioniert. Eine LED leuchtet kurz in einer Farbe auf, die den Ladezustand des Akkus anzeigt:
 - Rot: 30% oder weniger
 - Gelb: Mehr als 30 %, aber weniger als 75 %
 - Grün: 75% oder mehr
- «Start»-Button 1 Sekunde drücken, das Programm läuft und das Licht erlischt nach ca. 30 Sekunden wieder.
- Um eine Pause zu machen: «Start»-Button wieder 1 Sekunde drücken, das Licht blinkt **etwas langsamer als bei einer Startverzögerung**. Um das Programm wieder zu starten: «Start»-Button 1 Sekunde drücken und das Licht erlischt nach ca. 1 Minute wieder.
- **Kontrolle ob das Programm läuft:** «Batterie» drücken. Wenn beide Lämpchen durchgehend grün leuchten und nach ca. 30 Sekunden wieder sich ausschalten, **läuft alles garantiert richtig**.
- Wenn man abschalten will, kann man den «Start»-Knopf 4-5 Sekunden drücken. Wenn man danach nochmals die Batterie drückt, bleibt das «Start»-Licht dunkel. Dies zeigt an, dass das Gerät wirklich abgeschaltet ist.
- Wenn die «Start»-Lampe **etwas schneller** blinkt, dann wurde in der APP eine Startverzögerung eingestellt (maximal 1 Stunde). Sobald die Lampe bis zu einer Minute durchgehend ca. 30 Sekunden wieder grün leuchtet, läuft die Therapie.
- Wenn die «Start»-Lampe **etwas schneller** blinkt, wurde das Programm angehalten (Pause). Nochmals den Startknopf kurz drücken. Wenn es trotzdem nicht durchgehend 30 Sekunden lang leuchtet, einfach den «Start»-Knopf wieder 4-5 Sekunden drücken. Nach einer Sekunde den «Start»-Knopf wieder drücken und das Programm läuft wieder.

- Das Steuerungsgerät hat absichtlich kein Display. Jede möglich Stromquelle wurde weggelassen, damit wir so wenig wie möglich linksdrehenden Elektrosmog aussenden, welche das rechtsdrehende Nano-Biofeld stören könnte.
- Das Steuerungsgerät sendet keine Daten an die APP zurück. Wenn man nicht mehr sicher ist, welcher Wochenplan auf dem Steuerungsgerät gespeichert ist, muss man sicherheitshalber, jenes nochmals runterladen, welches man auf dem Steuerungsgerät haben möchte.
- Wer bei der Installation Probleme hat, kann jederzeit per Mail auf info@NanoCampo.ch Unterstützung anfordern oder seinen Therapeuten kontaktieren.

3.3. Behandlung von mehreren Menschen (Tieren) mit nur einer Matte

Viele möchten mit einer Matte mehrere Menschen oder auch Tiere behandeln. Wer zusätzlich ein Steuergerät und eine Sitzmatte kauft, kann damit die Wochenpläne bequem am Tag anwenden. Wenn jedoch das Budget nicht ausreichend ist und man möchte die Wochenpläne trotzdem am Tag anwenden möchte, sollte man so vorgehen:

Einrichten:

1. Für den zweiten Benutzer sollte man einen neuen Benutzer mit einer anderen Emailadresse einrichten. So erhält man 2 Chronologien.
2. In der App eröffnet man mit dem Passwortmanager zwei oder mehr Accounts mit der jeweiligen E-Mail-Adresse und dem jeweils richtigen Passwort

Wer keine 2 E-Mail-Adresse hat, arbeitet einfach mit nur einer Chronologie.

Anwenden:

- a) Die Person, welche in der Nacht die Wochenpläne anwendet, ladet diese Wochenpläne auf das Steuergerät runter.
- b) Am Tag arbeitet die zweite Person (oder Tier) mit dem Tablet über die APP und wendet jedes Mal den Wochenplan direkt an (die Daten auf dem Steuergerät bleiben davon unberührt). Bei Tieren ist es auch möglich, dass das Tier mit einer Decke auf dem Bett behandelt wird (mit der kleinen Matte wird der Hunde- oder Katzen-Korb auch auf die kleine Sitzmatte gelegt). Bei Menschen empfehlen wir die Matte unter dem Bett wegzunehmen und direkt darauf zu arbeiten.
- c) Man kann sich in der APP mit dem Passwort-Manager jederzeit ein- und ausloggen und den richtigen Benutzer anwählen.

3.4. Therapeuten-Anwendungs-Konzept

Therapeuten empfehlen wir ein Handy- oder Tablet zu verwenden, welches eine integrierte Ladestation hat. Mittels einer Docking-Station kann die Batterie des Android-Handy oder Tablet ständig geladen und gleichzeitig können die Programme angewendet werden.

Therapeutische Behandlungen *(bitte immer mit dem Wochenplan Meditation Tag arbeiten)*

Bitte jeden Klienten 2 Minuten vor der Behandlung direkt auf die Matte legen. Schon nach 2 Minuten sind alle Zellen beruhigt. Nach wenigen Sekunden ist das Kristallwasser wieder geordnet. Alle körperlichen wie auch feinstofflichen Therapien wirken Dank der Resonanz mit dem Nano-Biofeld bis 6mal besser mit der Unterstützung der Nanocampo-Matte.

Egal ob es sich um eine manuelle Therapie, eine ärztliche, naturheilkundliche oder physiotherapeutische Therapie, um eine energetische Methode, um eine kosmetische Behandlung oder um ein Haar-Styling handelt - in allen Fällen wird sich der Klient besser fühlen. Wer in seinem Wartezimmer auch Sitzmatten zur Verfügung stellt, wird ebenfalls in kurzer Zeit die positiven Reaktionen der Klienten erhalten. Lass dich beraten. Wir kennen viele Lösungsmöglichkeiten, wie du deine Klienten besser unterstützen kannst.

Therapeutische Fernbehandlungen für mediale Arbeiten

(bitte immer mit dem Wochenplan Meditation Tag arbeiten)

Bei Fernbehandlungen hat der Therapeut zwei Möglichkeiten:

- Der Therapeut kann selbst auf der Matte liegen. Damit hat er eine bis 6mal bessere feinstoffliche Verbindung zum Klienten.
- Auf der Matte liegt ein Surrogat. Der Therapeut arbeitet über das Surrogat. Wir empfehlen gleichzeitig über das Tablet eine persönliche Life-Verbindung zum Klienten aufzubauen, damit die Reaktionen der Therapie, parallel dazu, verfolgt werden kann.

Wir wünschen dir mit dem NanoCampo-System viel Erfolg und eine gute Gesundheit.



Haselhalde GmbH

Haselhalde 1

5436 Würenlos